


# Instructions for using Fentanyl Test Strip

## IV/Injectable Drugs


If you inject heroin or other drugs, you should test every time you inject. The easiest method is to test the residue from your spoon or cooker.

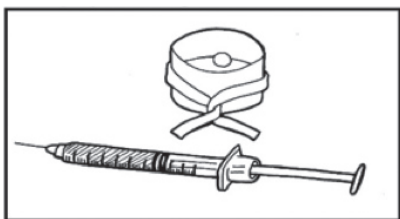

- 1 After preparing your shot, set the needle aside and wait to inject.



- 2 Add about 1ml (1/4 of a teaspoon) of clean water into the spoon or cooker.
- 3 Hold the blue end of the test strip and insert the other end into the liquid.
- 4 Allow the liquid to travel up the strip into the test area. (This may take 30 seconds.)

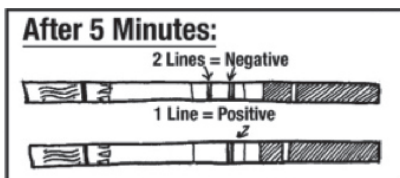


- 5 Set the strip down on a flat surface and wait about five minutes.


# Powder / Crystal / Pressed Drugs

## ENTIRE SUPPLY (RECOMMENDED):

- 1 Place your dose in a small glass (crush pills or crystals into powder before testing)

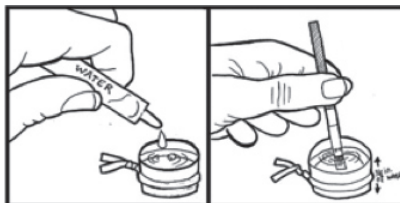

- 2 **A.** For meth or MDMA, add one teaspoon of water for each 10mg of powder/crystal.  
**B.** For Cocaine and other powdered drugs, add two teaspoons of water for each 100mg of powder.  
**C.** For tablets, add just enough water to dissolve the crushed powder.
- 3 Stir until contents are completely dissolved.
- 4 Hold the blue end of the test strip and insert the other end into the liquid, no higher than the blue line.
- 5 Allow liquid to travel up into the test are (This may take 30 seconds).

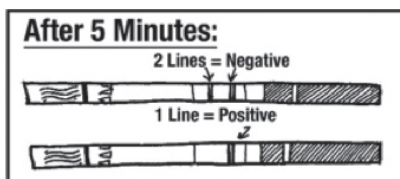

- 6 Set the strip on a dry, flat surface, wait about five minutes, and read results.


# Powder / Crystal / Pressed Drugs

## RESIDUE (SECOND BEST):

- 1 Empty supply onto a plate and crush into the finest powder possible.
- 2 Place powder into a baggie and shake thoroughly.
- 3 Pour powder back onto the plate. There will be residue stuck to the inside of the baggie.




- 4 Put about 1/2 teaspoon of water into the baggie and swish around to dissolve the residue. (NOTE: for MDMA or meth, a full teaspoon of water may be necessary to avoid a false-positive result)
- 5 Hold the blue end of the test strip and insert the other end into the liquid in the baggie, no higher than the blue line.
- 6 Allow liquid to travel up into the test are (approximately 15 seconds).
- 7 Set the strip on a dry, flat surface, wait about two minutes, and read results.

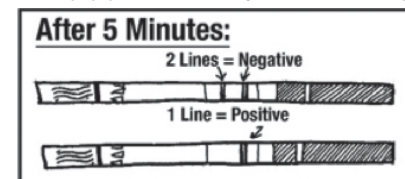


# Instrucciones para las tiras reactivas

## Medicamentos intravenosos / inyectables


Si se inyecta heroína u otras drogas, debe realizar una prueba cada vez que se inyecte. El método más fácil es analizar el residuo de su cuchara o olla.

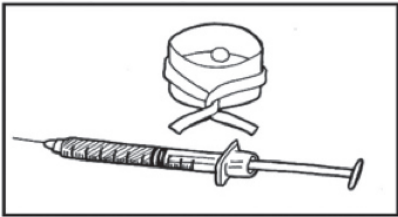

- 1 Después de preparar su inyección, deje la aguja a un lado y espere para inyectar.

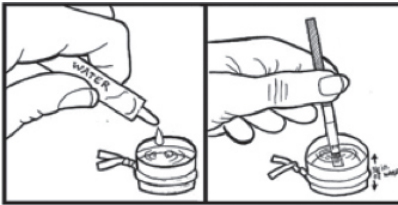

- 2 Agregue aproximadamente 1 ml (1/4 de cucharadita) de agua limpia en la cuchara o olla.
- 3 Sostenga el extremo azul de la tira reactiva e inserte el otro extremo en el líquido.
- 4 Deje que el líquido suba por la tira hasta el área de prueba. (Esto puede tardar 30 segundos).

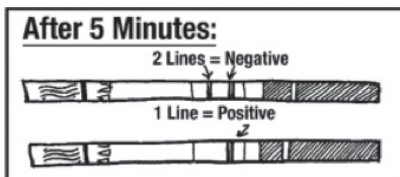


- 5 Coloque la tira sobre una superficie plana y espere unos cinco minutos.

## Polvo / Cristal / Medicamentos comprimidos


### SUMINISTRO COMPLETO (RECOMENDADO):

- 1 Coloque su dosis en un vaso pequeño (triture las píldoras o cristales en polvo antes de realizar la prueba)

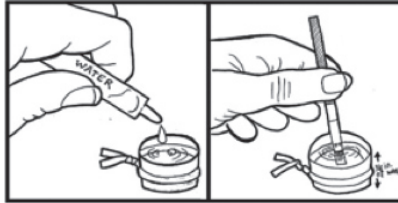

- 2 **A.** Para metanfetamina o MDMA, agregue una cucharadita de agua por cada 10 mg de polvo / cristal.  
**B.** Para la cocaína y otras drogas en polvo, agregue dos cucharaditas de agua por cada 100 mg de polvo.  
**C.** Para las tabletas, agregue suficiente agua para disolver el polvo triturado.
- 3 Revuelva hasta que el contenido se disuelva por completo.

- 4 Sostenga el extremo azul de la tira reactiva e inserte el otro extremo en el líquido, no más alto que la línea azul.
- 5 Permita que el líquido suba al área de prueba (esto puede demorar 30 segundos (Esto puede tomar 30 segundos))

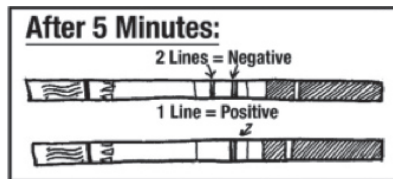


- 6 Coloque la tira sobre una superficie plana y seca, espere unos cinco minutos y lea los resultados.


## Polvo / Cristal / Medicamentos comprimidos

### RESIDUO (SEGUNDO MEJOR):

- 1 Vacíe el suministro en un plato y tritúrelo hasta obtener el polvo más fino posible.
- 2 Coloque el polvo en una bolsita y agite bien.
- 3 Vierta el polvo de nuevo en el plato. Habrá residuos adheridos al interior de la bolsa.

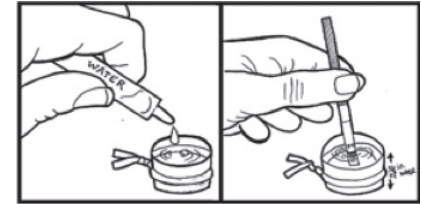

- 4 Ponga aproximadamente 1/2 cucharadita de agua en la bolsita y haga buches para disolver el residuo. (NOTA: para MDMA o metanfetamina, puede ser necesaria una cucharadita de agua para evitar un resultado falso positivo)
- 5 Sostenga el extremo azul de la tira reactiva e inserte el otro extremo en el líquido de la bolsa, no más alto que la línea azul.
- 6 Permita que el líquido suba al área de prueba (aproximadamente 15 segundos).

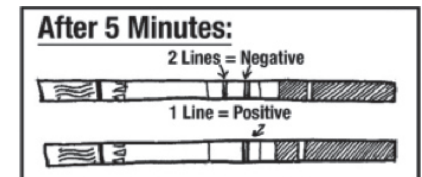

- 7 Coloque la tira sobre una superficie plana y seca, espere unos dos minutos y lea los resultados.